

ORDEM DE SERVIÇO

os: 25093

Data: 07/02/2025




Instituição: UFCSPA			
Departamento de Farmacociências - Central Analítica			
Endereço: Rua Sarmento Leite, 245			Alter. cadastral? Não
Compl.: Centro histórico		Cidade: Porto Alegre	UF: RS
Solicitante: Camila Scheid		Telefone: 51 3303 8883	
Email: camilascheid@ufcspa.edu.br		Proposta/Nº de contrato: 71656	
Modelo: Genius 1051 (230 V)		Nº de Série: 720120923	Data instalação: N/A
Versão software: V4.10			
Serviço: Manutenção Preventiva		Tipo: Pago por evento	Faturamento: Cliente
Descrição do chamado			
Manutenção Preventiva			
Condições gerais			
Horas Uso: 23359 hrs	N/S Comp.1: 112000011415	Hrs: 22376	Refit 1/3
Temp.: 22,0 °C	N/S Comp.2: 112000011417	Hrs: 22338	Refit 1/3
Umidade: 59%	N/S Comp.3:	Hrs:	Refit
Tensão: 226 V	N/S Comp.4:	Hrs:	Refit
Aplicação: SHIMADZU LCMS 8045			Peak Scientific Av. Queiroz Filho 1700, Torre A, Sala 5 Vila Leopoldina - 05319-000 São Paulo -SP Telefone: +55 11 3644-4246 brazilservice@peakscientific.com
Peças Utilizadas			
Qtd.	P/N	Descrição	Lote/Série
2	3302654	Filter Dual 1st Stage Element (Peak)	
4	3303155	O-Ring 11.1mm x 1.6mm NBR	
2	3301873	Filter Dual 2nd Stage Element (Peak)	
1	3302118	Filter RAC Element (Peak)	
1	3302499	Filter 0.01 (Peak) (Air Dryer)	
5	04-4534	Relay 10A 5 Pin	
2	3300859	Compressor Service Kit 2755.	
2	02-4805	Adaptor 1/4"M BSPPxQuick Release	
1	3301215	Filter Acoustic Disk	
1	06-3200	Transformer Dual Tap 200-230Vac	
1	3303153	Dryer with purge port	
2	06-9139	Compressor Piston Sleeve Kit 2750	
1	02-1054	Element Filter No.11 Polyester 1" Outlet	
Trabalho Realizado			
Equipamento com Led de High duty acionado. Durante a inspeção do equipamento foi percebido que a membrana de secagem estava com purga elevada sendo necessário a sua troca e os selos dos 2 compressores rompidos. Logo após a manutenção preventiva,foi realizado os testes de pressão e vazão conforme instruções do fabricante, equipamento entregando 15l/min de nitrogênio e 10 l/min de Ar. Equipamento liberado para uso. Obs: É importante evitar a manipulação de solventes orgânicos voláteis, a presença de bombas de vácuo lubrificadas com óleo próximos ao gerador e a limpeza do piso com produtos clorados, pois estas substâncias acarretam saturação prematura de partes e componentes internos do gerador, diminuindo a vida útil e impactando na qualidade do gás produzido pelo gerador			
Página 1 de 2			

ORDEM DE SERVIÇO

OS: 25093

Data: 07/02/2025

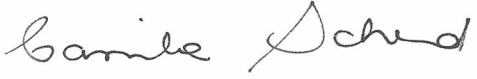

Horário Início: 8:00		Horário Término: 16:00			
Deslocamento: 15 min					
Serviço concluído?	Sim	Equipamento liberado para uso?	Sim	Orçamento necessário?	Não
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O SERVIÇO REALIZADO, MENCIONADO ACIMA					
Assinatura do responsável Peak			Assinatura do cliente		
					
Nome			Nome		
Ricardo Assunção			Camila Scheid		
					
Página 2 de 2					